Edge ONE

TECHNISCHE DATEN

CO2 Glass Lasermedium Wellenlänge 10,600 nm Ziellaser Diode 655 nm Maximale Energie 30 Watt

Laser-Modus

Kontinuierlich, Einzelpuls, Gruppenpuls, Impulsfolge

Leistungsabgabe

1 ~ 30 Watt, ULTRA

CHIRURGISCHER MODUS Pulslänge

1 ~ 1000 ms, ULTRA 0,08 ~ 1 ms

Pulspause Frequenz (ULTRA) 1 ~ 1000 ms

10 ~ 500 Hz

1 ~ 30 Watt, Edge Puls

Aufsatz

120, 120(S), 350, 800 mm

FRAKTIONIERTER MODUS Pulsenergie

1 ~ 300 mJ

Scanbereich

2 x 2 ~ 15 x 15 mm

Scanform

Quadrat, Dreieck, Kreis

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (BxTxH) Elektrische Versorgung 240 mm x 280 mm x 440 mm 230 V, 50/60 Hz, 1 kW

Gewicht

32 kg





BEAUTY TECH - Medizinische Ästhetik

Schwitterberg 111

D-58708 Menden

E-Mail: info@beauty-tech.de Telefon: +49 2373 39530 21 Web: www.beauty-tech.de



Edge ONE / Surgical Mode



HIGH PEAK POWER


Durch den Ultra-Pulse-Modus arbeitet der Laserstrahl besonders präzise – das umliegende Gewebe wird dabei nicht beschädigt. Auch bei sehr kleinen Läsionen von weniger als 1 mm ist er nutzbar.

EDGE PULSE

Der Edge-Pulse-Modus bietet die höchste Spitzenleistung bei kürzester Pulsdauer. Dabei erreicht er die höchste Eindringtiefe und begrenzt die thermische Schädigung des umliegenden Gewebes auf ein Minimum.

Klassische 30 W



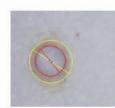

ULTRA PULSE

Ultra Pulse of Edge ONE überträgt Energie in die Tiefe der Haut. Er kann eine sehr enge Ablationszone erzeugen – so bildet er eine thermische Diffusion, die auf das umgebende Gewebe begrenzt ist. Dies sorgt für weniger Schmerzen während der Behandlung und für weniger Narbenbildung danach.

Edge ONE / Fractional Mode





Die Einstellung der Spotgrößen während der Behandlung ist flexibel. So können Hauterhabenheiten und Läsionen ideal entfernt werden.





OPTIMALE ANPASSUNG DES SCANNERS AN DAS BEHANDLUNGSAREAL











EDGE ONE erreicht exzellente Ergebnisse bei der Verjüngung der Haut. Die Kollagenneubildung regt der tiefenwirksame Effekt des fraktionierten Handstücks an.

Edge ONE ist dadurch besonders zur Behandlung von feinen Linien und Fältchen geeignet.

INDIKATIONEN

- Hauterneuerung, Hautverjüngung
- Falten, Narben
- Hautunregelmäßigkeiten
- Hyperpigmentierungen (Lentigo)
- Hauterhabenheiten & -gutartige Läsionen
- Tonsillotomie, LAUP, Polypen
- Kondylome, Karzinome, Rhynophym
- Zysten, Konisation, Papillome
- Ablation, Koagulation
- Schneiden von Gewebe

Laser-Vaginalverjüngung

- Stressinkontinenz
- Relaxationssyndrom
- vaginale Atrophie

Edge ONE / Vaginal Tip

Die Edge genschich dem dabe kere Vagin


Edge ONE

Laser Vaginal Rejuvenation

Vaginale Kontraktion

Edge ONE ist eine fortschrittliche Konzept-Laserbehandlung mit einem speziellen Puls. So wird die Basalschicht der Vagina mit einer minimal-invasiven Methode stimuliert. Edge ONE strafft so die lose Vaginalmembran

Die Edge ONE-Behandlung regeneriert die Kollagenschicht der Scheidenmembran und hilft außerdem dabei, eine gesündere und feuchtigkeitsstärkere Vaginalumgebung aufzubauen

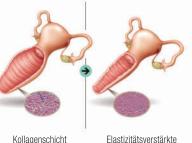

ohne Elastizität Kollagenschicht

Edge ONE ist eine einfache und risikoarme Laserbehandlung, mit der verschiedene vaginale Probleme behandelt werden können.

Edge ONE ist einsetzbar zur fraktioniert-ablativen Laserbehandlung und Verjüngung des vaginalen Gewebes bei Stress-Harninkontinenz, Scheidentrockenheit und Lichen Sclerosus.



und ist dafür geeignet, chronische Vaginalerkrankungen wie Harninkonti-

nenz, vaginale Trockenheit und atrophische Vaginitis zu behandeln.











Als leistungsstarkes System mit zahlreichen Behandlungmöglichkeiten ist **Edge ONE** unverzichtbar für die moderne Dermatologie, Ästhetik sowie Chirurgie.

EDGE ONE BIETET EINE AUßERGEWÖHNLICHE KLINISCHE PERFORMANCE MIT HERVORRAGENDEN ERGEBNISSEN!